

# Style MEDICAL PRO

家庭用電位治療器

美しく、癒される暮らしへ。

電位治療器の常識を変える、Style MEDICAL PRO、誕生。



販売名: Style メディカルプロ

## 身体の調子を整える「電位治療」

効果 頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解

※一般家庭で使用すること。




電極シート  
電界を形成し、身体を包み込みます。

絶縁マット  
足元からの放電を防止します。

操作しやすい「シンプルリモコン」




通電を知らせる「微弱振動システム」

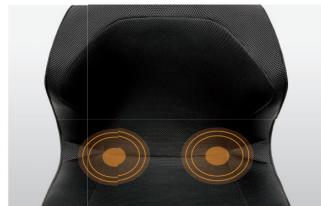

## 独自の姿勢メソッド「カイロサポートシステム」

正しい姿勢をサポートし、快適な座り心地を実現。

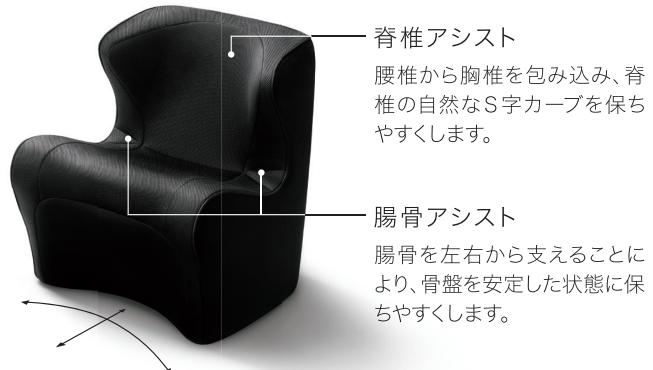

オーバーハング構造

立ち座りがしやすい構造を採用しました。



Style メディカルプロ  
なし



Style メディカルプロ  
あり

## 心地よさを追求した「快温ヒーター」

腰まわりを包み込み、心地よく温める。



背面ヒーター  
背中まわりを  
包み込むように温めます。

座面ヒーター  
太ももからおしりまで  
広範囲を温めます。

独立式ヒーターの採用により、せなか、おしり、ひざ\*の温かさを、それぞれ3段階から設定可能です。




\*ひざの温度設定は、別売のモイストプランケット使用時のみ行えます。



## うるおいと温かさを両立する「専用モイストブランケット」(別売)

特殊吸湿構造で空気中の水分を吸収。  
ヒーターを通して蒸気温熱として放出し、身体をうるおし温めます。

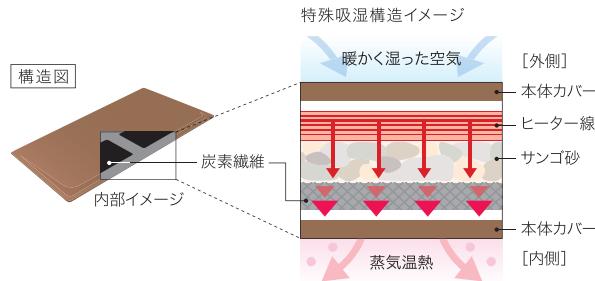

※使用時間や設定温度、または使用場所の温度や湿度により放出される水分量は変動します。

Styleメディカルプロ専用 モイストブランケット(ブラック/ブラウン) ¥30,000(税抜)

※本品はStyleメディカルプロ専用の製品です。※ブランケットの色は、チャコアと同色になります。

### ■ 製品仕様

販売名	Styleメディカルプロ
医療機器認証番号	230AGBZX00038000
販売価格	¥108,000(税抜)
製造販売元	株式会社日本理工医学研究所 〒859-3152 長崎県佐世保市新行江町800番地 電話:0956-30-8121

### ⚠ 危険

● 次のような医用電気機器とは、絶対に併用しないでください。事故や医用電気機器の誤作動をまねき、身体に著しい障害をもたらすことがあります。

- ・ペースメーカーなどの体内植込み型医用電気機器
- ・人工心肺などの生命維持用医用電気機器
- ・心電計などの装着型医用電気機器

### ⚠ 警告

● 心臓病と診断され、日常の過激な運動を制限されている方は使用しないでください。

● 事故のおそれがありますので子供には使用させないでください(ただし、保護者、医師または専門家の監督下で使用する場合はその限りではありません)。また、本品の上に乗らせたり、遊ばせたりしないでください。

● 次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用してください。

- また、(9)から(12)に該当する方が1時間を超えて使用する場合も医師にご相談ください。
- (1)悪性腫瘍のある方
- (2)心臓に障害のある方
- (3)腰や背中に異常のある方

- (4)妊娠初期の不安定期または出産直後の方
- (5)糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方

- (6)体温38℃以上(有熱期)の方  
例1. 急性炎症症候群(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期  
例2. 衰弱している場合

- (7)安静を必要とする方

- (8)脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう(疼)痛性]疾患の方

- (9)高血圧の人

- (10)不整脈のある方

- (11)睡眠時無呼吸症の方

- (12)ぜん(喘)息の方

上記に当てはまらない場合でも、身体に異常を感じている方、医療機関で治療中の方、その他ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

### ⚠ 注意

- 温度感覚喪失が認められる方は使用しないでください。
- 浴室などの湿度の高い所では使用しないでください。
- 床材やたたみ、じゅうたんなどの材質によっては、傷がついたり色が移ったりするおそれがあります。マットやカーペットを敷いた上で本品を使用するなど注意してご使用ください。
- ベットおよび動物には使用しないでください。コード類やチェア、モイストブランケットへの噛み付き・ひっかきや尿をかける等により、故障の原因となる恐れがあります。
- 睡眠薬等を服用した人や、めいてい(酩酊)状態の人、身体の自由が利かない人や乳幼児は使用しないでください。
- 他の治療器と一緒に使用しないでください。
- 火気の近くや高温環境(ホットカーペットの上、こたつなど)では使用しないでください。